

Maintenance et entretien

Mindray Beneheart C1A / C2

Contrôle de l'état de l'appareil

Le Mindray Beneheart C1A / C2 effectue des autotests automatiques sur une base hebdomadaire. Aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire. Pour s'assurer que le défibrillateur soit toujours prêt à l'emploi, le fabricant recommande de vérifier les points suivants chaque semaine.

(Il **n'est pas nécessaire de mettre l'appareil en marche pour cela**) :

1. Vérifier l'état de l'appareil via la lumière d'état
(Clignote rapidement toutes les 5 secondes)

= **Appareil prêt à l'emploi**
Appareil, batterie & électrodes OK

= **Appareil non prêt à l'emploi**
«Allumer l'appareil et suivre les instructions de l'appareil»

2. Vérifier la date de péremption des électrodes
À travers la fenêtre transparente sur le capot

3. Vérifier l'alarme du caisson mural
(Si le dispositif est fourni avec le caisson)

Remplacement de la batterie et des électrodes

Lorsqu'il n'est pas utilisé, la durée de vie des électrodes et de la batterie du défibrillateur est d'environ 5 ans. En cas de niveau de charge bas de la batterie, des instructions vocales appropriées seront émises.

Instruction pour le remplacement de la batterie et des électrodes

1. Retirez les vis du couvercle du compartiment de la batterie et ouvrez-le comme illustré. (Fig.1).
2. Faites glisser la batterie vers la gauche et retirez-la du compartiment en la soulevant vers le haut. Alignez la nouvelle batterie et insérez-la dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Remplacez le couvercle et vissez-le une fois en place. (Fig.2).
3. Ouvrez le capuchon de la prise. Débranchez l'ancienne électrode et connectez la nouvelle. (Fig.3).
4. Insérez délicatement le sachet des électrodes dans les supports prévus à cet effet. La date d'expiration de l'électrode doit être visible dans la fenêtre transparente située dans le capot. Placez le câble des électrodes dans les supports prévus pour le sachet de ces dernières.
Assurez-vous que le commutateur de mode (Adulte/Enfant) fonctionne en le basculant vers la gauche ou la droite. Fermez le couvercle et assurez-vous que le voyant d'état est vert. (Fig. 4).

Fig. 1



Fig. 2

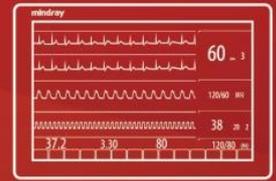


Fig. 3



Fig. 4





Country	Switzerland
Contact	Procamed AG
Project	Manual addendum
Device	BeneHeart C-Series

This memo is intended to explain chapter 8.2 of the BeneHeart C series manual.

Regarding "maintenance" under chapter 8.2. Mindray C-Series AED are maintenance free and do not require any special maintenance. However, the device needs 'inspection'. A visual inspection of the battery and pads. We recommend to do this inspection at least once per month.

8.2 Maintenance Safety Information

WARNING

- Failure for the responsible institution employing this equipment to implement a satisfactory maintenance schedule may cause undue equipment failure and delayed analysis.
- No modification of this equipment is allowed.
- This equipment contains no user serviceable parts.
- The safety checks or maintenance involving any disassembly of the equipment should be performed by professional servicing personnel. Otherwise, undue equipment failure and possible health hazards could result.
- The service personnel must be properly qualified and thoroughly familiar with the operation of the equipment.

The check and the replacement of the pads and battery can be replaced by anyone. No special training is needed. Pads and battery are not parts but disposables.

For any related questions, feel free to reach out to me.

Kind Regards,

Michel Rijnberk

Patient Monitoring Life Support
Business Development Manager AED - Europe

e-mail: michel.rijnberk@mindray.com

mobile: +31 645868895

G Inspection Record

Current Date: Month/Year: 2
Page: 1 of 1 in the corresponding file

Daily Checklist					
Inspected Date	Status Indicator Green Red	Inspected by	Inspection Date	Status Indicator Green Red	Inspected by
1.	<input type="checkbox"/>		17.	<input type="checkbox"/>	
2.	<input type="checkbox"/>		18.	<input type="checkbox"/>	
3.	<input type="checkbox"/>		19.	<input type="checkbox"/>	
4.	<input type="checkbox"/>		20.	<input type="checkbox"/>	
5.	<input type="checkbox"/>		21.	<input type="checkbox"/>	
6.	<input type="checkbox"/>		22.	<input type="checkbox"/>	
7.	<input type="checkbox"/>		23.	<input type="checkbox"/>	
8.	<input type="checkbox"/>		24.	<input type="checkbox"/>	
9.	<input type="checkbox"/>		25.	<input type="checkbox"/>	
10.	<input type="checkbox"/>		26.	<input type="checkbox"/>	
11.	<input type="checkbox"/>		27.	<input type="checkbox"/>	
12.	<input type="checkbox"/>		28.	<input type="checkbox"/>	
13.	<input type="checkbox"/>		29.	<input type="checkbox"/>	
14.	<input type="checkbox"/>		30.	<input type="checkbox"/>	
15.	<input type="checkbox"/>		31.	<input type="checkbox"/>	

Monthly Checklist
Expiration date of electrode pads: