


# VKU

## Elektrodenverlängerung mit Universal-Kupplung Lead Extension with Universal Coupler

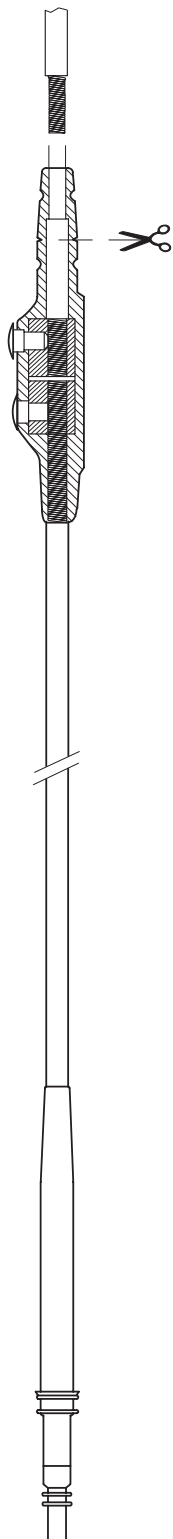

### Artikelbeschreibung

Die permanente implantierbare Elektrodenverlängerung VKU dient der Verbindung eines Herzschrittmachers an eine liegende Schrittmacher-Elektrode, deren Stecker entfernt wurde. Die Universalkupplung ist mit selbstdichtenden Kunststoffschrauben versehen und verfügt über sehr guten mechanischen und elektrischen Kontakt. Dank des durchsichtigen Kupplungs-Materials kann der Kontakt auch optisch kontrolliert werden.

Typ: ..... **VKU**  
 Länge: ..... 10 cm, 20 cm, 40 cm  
 Wendelaufbau: ..... 4-fach gewendelt  
 Isolation: ..... *Silikon (med. Qualität)*

#### Aufnahme Universalkupplung

Max. Wendeldurchmesser ..... 1,4 mm  
 Max. Isolationsschlauch-Ø ..... 2,4 mm

Lieferumfang: - 1 Elektrodenverlängerung  
 mit einseitig montierter  
 Universal-Kupplung  
 - 1 Sechskantschlüssel

### Product Description

The permanent implantable lead extension VKU extends an implanted unipolar lead, which connector has to be removed, to a pacemaker. The VKU incorporates a connector IS-1 on one end and the universal coupler with self sealing plastic screws on the other end. The exceptionally constructed coupler warrants a secure mechanical and correspondingly an excellent electrical contact between the conductor of the lead and the coupler.

The clear coupler material facilitates the visual inspection of the splice.

Type: ..... **VKU**  
 Length: ..... 10 cm, 20 cm, 40 cm  
 Coil: ..... *quadrifilar*  
 Insulation: ..... *Silicone (med. grade)*

#### Coupling capability

Max. lead conductor coil-Ø ..... 1.4 mm  
 Max. insulation diameter ..... 2.4 mm

Delivery volume: - 1 Lead extension  
 with attached multi-coupler  
 - 1 Allen wrench

### Artikelbezeichnung Product name

Artikel-Nr.  
Article-no.      Stück  
Unit

#### Elektrodenverlängerung mit IS-1 Anschlußstecker Lead Extension with Connector Pin IS-1

Typ Type	Länge Length	Stecker connector pin
VKU 17	10 cm	IS-1
VKU 27	20 cm	IS-1
VKU 47	40 cm	IS-1

53222	1
53928	1
53223	1

#### Zubehör / Accessory

MK3 - Medizinischer Kleber 5 g Tube	- Medical Adhesive 5 g - tube
--	----------------------------------

53300	1
-------	---

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.  
 Für Einmalgebrauch bestimmt!  
 Goods supplied gas-sterilized.  
 For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.  
 The right to make technical improvements without notice is reserved.