


LASSOS / CATCHER

Interventional and Pediatric Cardiology

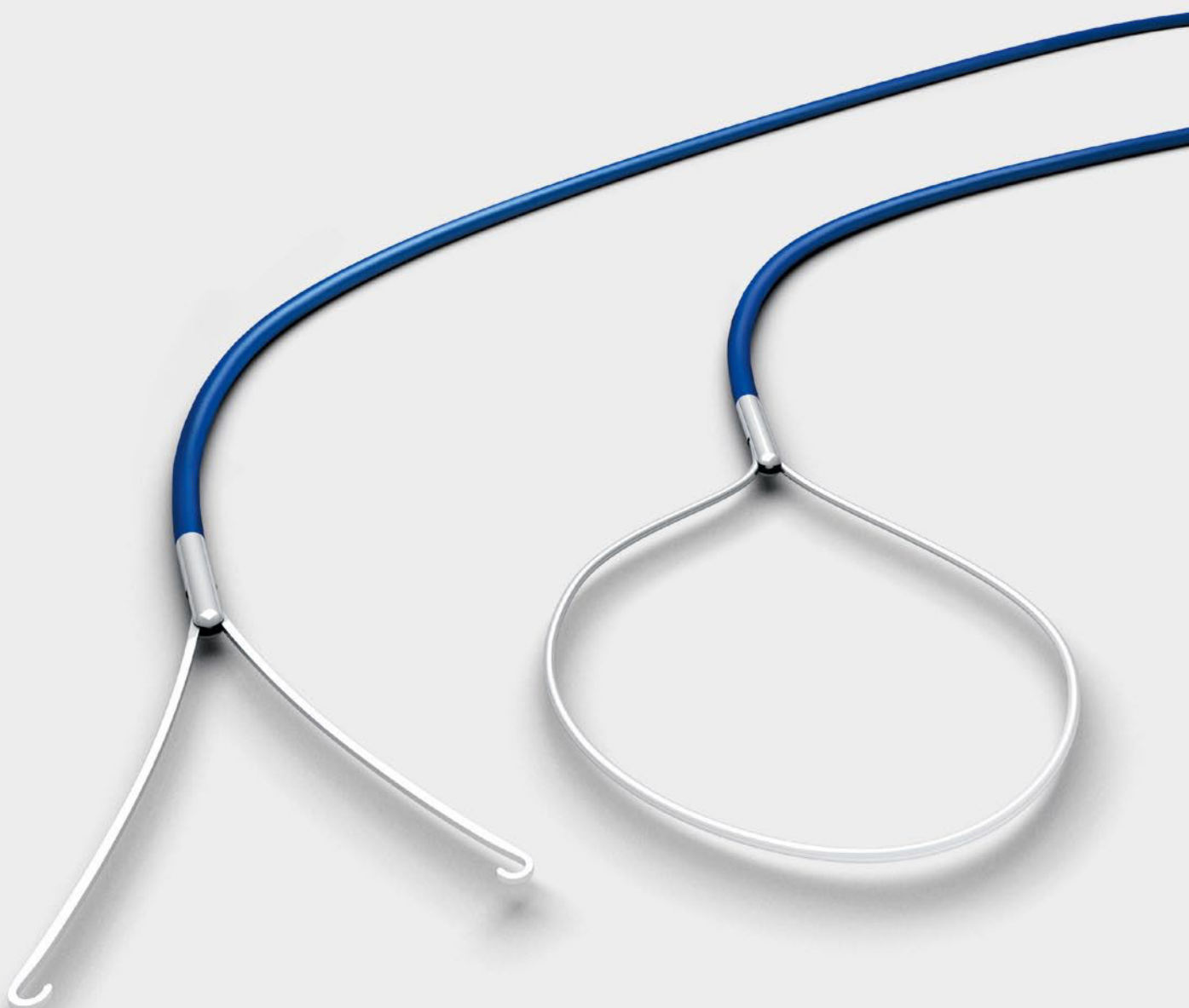

+++

LASSOS – Schlingenkatheter / CATCHER – Fangkatheter
LASSOS – Snare Catheter / CATCHER – Forceps Catheter

 **OSYPKA**
Technology for an active life.

LASSOS / CATCHER

LASSOS – Schlingenkatheter / CATCHER – Fangkatheter

LASSOS – Snare Catheter / CATCHER – Forceps Catheter

Interventional and Pediatric Cardiology

LASSOS – Schlingenkatheter

LASSOS ist ein Schlingenkatheter, dessen Fangschlinge stufenlos bis maximal 40 mm Durchmesser ausgefahren werden kann. Sie besteht aus hochflexiblem, knickresistentem und extrem formstabilem Nitinol.

Indikationen:

- Einfangen und Entfernen von Fremdkörpern aus dem Gefäßsystem
- Entfernen von Schrittmacherelektroden

Besondere Eigenschaften:

- Anstellwinkel von 45° und 90° je nach Modell
- Schlinge vollständig einziehbar
- Atraumatische Katheterspitze

CATCHER – Fangkatheter

CATCHER ist ein Fangkatheter mit ausfahrbaren Fangarmen, die sich dabei stufenlos bis zu ~12 mm auseinander spreizen. Die Fangarme sind aus medizinischem Edelstahl gefertigt.

Indikationen:

- Einfangen und Entfernen von Fremdkörpern aus dem Gefäßsystem

Besondere Eigenschaften:

- Fangarme nahezu vollständig einziehbar

LASSOS – Snare Catheter

LASSOS is a snare catheter with a loop that can be extended smoothly up to 40 mm in diameter. It is made out of highly flexible, buckle-resistant and shape-maintaining Nitinol.

Indication:

- To catch and retrieve foreign bodies out of the vascular system
- Extraction of permanent pacing leads

Special Features:

- Angle of the snare in relation to the shaft: 45° or 90° dependent on the model
- Snare can be completely retracted into the shaft
- Atraumatic tip of the shaft

CATCHER – Forceps Catheter

CATCHER is a forceps catheter with medical grade stainless steel tentacles that can smoothly be extended up to ~12 mm in width.

Indication:

- To catch and retrieve foreign bodies out of the vascular system

Special Features:

- Tentacles can be retracted close to the catheter

Bestellinformationen / Ordering information:

	Artikel-Nr. Article No.	Öffnungsweite Opening width	Anstellwinkel Loop angle	Schaftgröße Shaft size	Empfohlene Schleuse Recommended introducer	Nutzbare Länge Usable length
LASSOS	22792	0–40 mm	45°	1.75 mm	> 5.5 F	110 cm
	22793	0–40 mm	90°	1.75 mm	> 5.5 F	110 cm
CATCHER	07091	0–~12 mm	–	1.75 mm	> 5.5 F	110 cm

Vor Anwendung des Produktes müssen alle Produktetiketten, Beipackzettel, Bedienungsanleitungen, sowie die Indikationen, Kontraindikationen, Warn- und Gefahrenhinweise und Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt werden. Die Produkte dürfen nur von qualifizierten und in dem Gebiet erfahrenen Fachärzten benutzt werden.

Before use, consult product labels, inserts and instructions for use for any indications, contraindications, warnings, hazards and cautions. Products may only be used by a qualified and trained physician with expertise in this field.

 **OSYPKA**
Technology for an active life.