



RÉANIMATION :

UN SOUTIEN POUR VOTRE SYSTÈME DE SOINS

Avez-vous des difficultés à trouver des électrodes quand vous en avez besoin ?

OUI

☐

NON

☐

Utilisez-vous des électrodes uniquement au moment de délivrer un choc ?


☐☐

Les électrodes ont-elles été testées pour être utilisées avec votre défibrillateur ZOLL® ?

☐☐

A photograph of a clinical training environment. In the foreground, a medical training mannequin lies on a gurney. A female healthcare professional in blue scrubs and gloves is adjusting a black blood pressure cuff on the mannequin's arm. Another healthcare professional, a male in a white lab coat and glasses, is using a stethoscope on the mannequin's chest. A large, dark blue rectangular box is superimposed over the center of the image, containing white text. The background shows a typical hospital room with metal racks and medical equipment.

Misez sur
l'innovation,
simplifiez la
réanimation

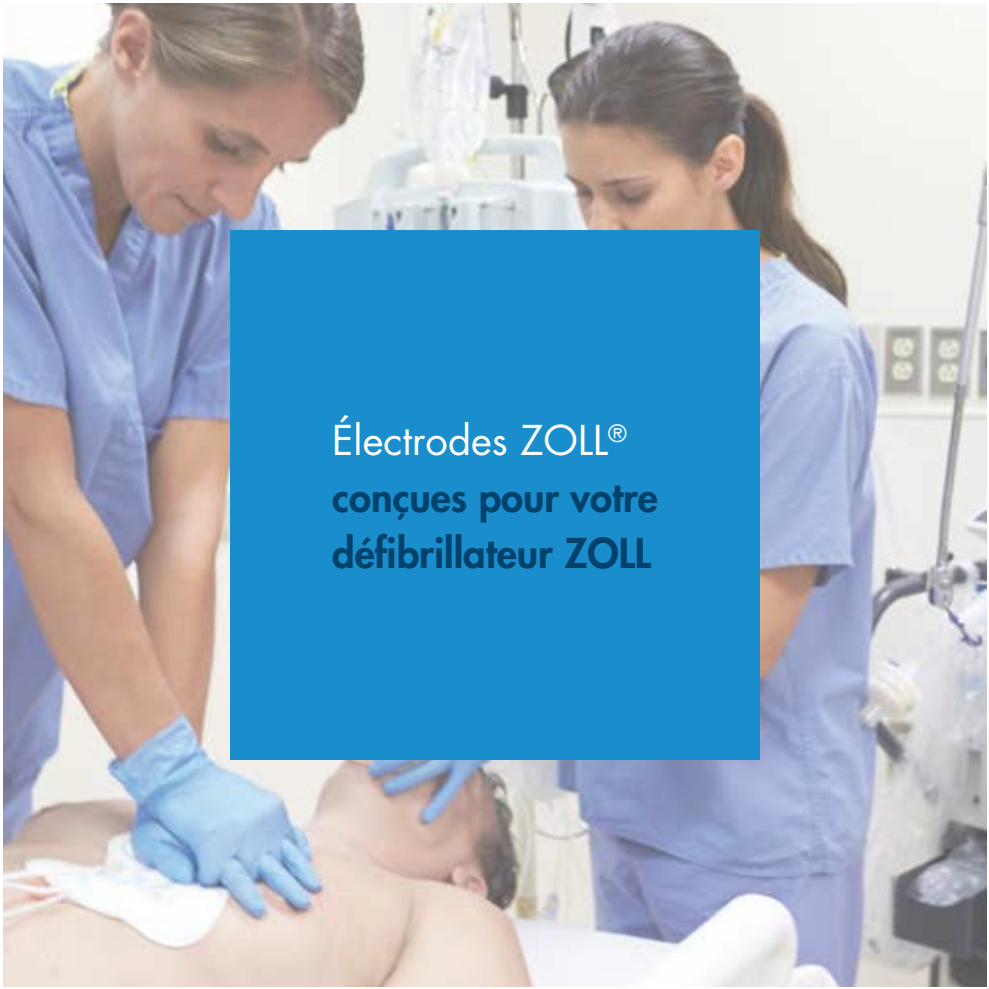

Électrodes ZOLL®
conçues pour votre
défibrillateur ZOLL

AMÉLIORATION DES SOINS AUX PATIENTS

Soins de haute qualité et sécurité pour vous et votre patient

Toutes les électrodes autoadhésives ZOLL ont été testées et validées pour une utilisation avec les défibrillateurs ZOLL, permettant une intervention plus sûre et plus hygiénique pour le patient et le clinicien.^{1,2,3} De la réduction du risque d'infection croisée chez les patients⁴ à la réduction du risque de choc accidentel pour les cliniciens,² faire le choix d'électrodes d'origine ZOLL, c'est aussi investir dans votre système de soins.




Grand choix d'électrodes multifonctions pour répondre aux différents besoins cliniques

Les électrodes multifonctions pour les interventions d'urgence sont conçues pour répondre à de nombreux besoins cliniques, comme la surveillance ECG, la défibrillation, la stimulation, la cardioversion et Real CPR Help®.

BONNE ADHÉRENCE CUTANÉE

Électrodes avec gel liquide idéales pour la stimulation à long terme ou les cardioversions

ZOLL est le seul fabricant d'électrodes qui propose du gel liquide comme solution alternative au gel solide. Ces électrodes fonctionnent avec un polymère visqueux liquide (LVP) unique offrant une excellente adhérence à la peau, produisant moins de bulles d'air et éliminant quasiment les lésions cutanées postopératoires. C'est le choix idéal pour la stimulation à long terme ou la cardioversion.

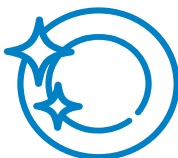

Électrodes avec gel solide pour augmenter l'adhérence à la peau et réduire les opérations de lavage du patient

Le gel solide à haute viscosité assure une excellente adhérence à la peau, diminue rapidement la résistance, a une durée de conservation plus longue et réduit les opérations de lavage du patient après utilisation une fois l'électrode retirée.

DES PERFORMANCES DE RCP AMÉLIORÉES

Accédez à des électrodes de RCP qui vous aideront à effectuer une RCP de qualité...

La technologie Real CPR Help vous fournit un retour audio et visuel sur la fréquence et la profondeur des compressions conformément aux recommandations de l'AHA/ERC. En mode manuel et en association avec les électrodes de RCP, la technologie See-Thru CPR® de ZOLL, dont sont dotés les moniteurs/défibrillateurs R Series® et X Series®, permet aux secouristes de voir le rythme cardiaque sous-jacent pendant la RCP, réduisant ainsi la durée des pauses entre les compressions. N'oubliez pas que plus la qualité de la RCP est élevée, plus les taux de RACS sont importants.⁵



...ce qui vous assure une amélioration continue de la qualité

L'utilisation d'électrodes de RCP combinées à notre logiciel RescueNet® CaseReview permet aux hôpitaux de recueillir les données de RCP afin de les utiliser lors de débriefings, dont il a été prouvé qu'ils améliorent la qualité de la RCP.^{6,7,8}

OPTIMISATION DU TEMPS ET DES RESSOURCES

Possibilité d'utiliser des électrodes préconnectées pour une réanimation plus rapide

Les électrodes ZOLL dotées de la fonction de préconnexion permettent de gagner du temps et d'accélérer le déploiement, ce qui garantit que l'équipement de réanimation ZOLL est prêt quand vous en avez le plus besoin. Les électrodes OneStep™ préconnectées de ZOLL permettent même d'effectuer un test de 30 joules pendant l'autotest automatisé lorsqu'elles sont utilisées avec le R Series.



Utilisation adaptée à vos défibrillateurs ZOLL pour une plus-value optimale

ZOLL vous propose une large sélection d'électrodes pour soutenir votre système de soins et vous aider à tirer le meilleur parti de votre défibrillateur ZOLL.

**Pour plus d'informations,
contactez votre représentant local
ZOLL ou scannez le code QR.**



¹Stults KR, et al. Ann Emerg Med. 1987;16:872-877.

²Wilson RF, et al. Am. J. Cardiol. 1987;60:4: 380-2.

³Bojar RM, et al. Ann Thorac Surg. 1988;46:587-588.

⁴Lee C, et al. Singapore Med J. 2017 Jul;58(7):354-359.

⁵Panchal AR, et al. Circulation. 2020;142[suppl 2]:S366-S468 (2).

⁶Bleijenberg E, et al. Resuscitation. 2017;110:1-5.

⁷Wolfe H, et al. Crit Care Med. 2014;42:1688-1695.

⁸Edelson DP, et al. Arch Intern Med. 2008;168:1063-1069.

L'utilisation d'électrodes de tiers avec les produits ZOLL n'est pas recommandée. ZOLL décline toutes allégations et garanties à l'égard des performances et de l'efficacité de ses produits lorsque ceux-ci sont utilisés en conjonction avec des électrodes de tiers. Les défaillances du défibrillateur imputables à l'utilisation d'électrodes de tiers peuvent annuler la garantie de ZOLL.

269 Mill Road • Chelmsford, MA 01824 • 978-421-9655 • 800-804-4356 • zoll.com

Copyright © 2023 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. OneStep, R Series, Real CPR Help, RescueNet, See-Thru CPR, X Series et ZOLL sont des marques commerciales ou des marques déposées de ZOLL Medical Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MCN IP 2308 0770-02

ZOLL®