
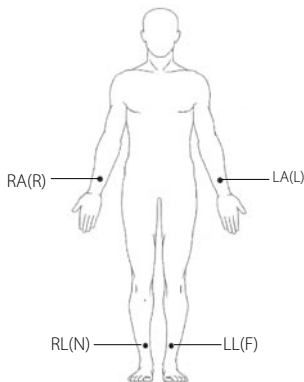


Électrocardiographe BeneHeart R3/BeneHeart R3A

Guide d'utilisation rapide

Mise en place des électrodes

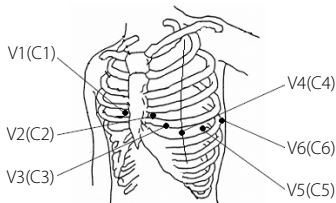

Préparation du patient

1. Préparez la peau sur les sites de mise en place des électrodes de la façon suivante :
 - a. Exposez les sites de mise en place des électrodes.
 - b. Rasez les poils de chaque site de mise en place des électrodes.
 - c. Dégraissez chaque site de mise en place des électrodes avec de l'alcool et frottez légèrement avec un tampon de gaze sec pour éliminer les cellules mortes. Séchez complètement la peau.
2. Appliquez les électrodes de la façon suivante :
 - a. Connectez respectivement les 6 fils de dérivation thoraciques et les 4 fils de dérivation des membres aux électrodes.
 - b. Si vous utilisez des électrodes réutilisables, appliquez une fine couche de gel conducteur sur le site de mise en place de chaque électrode et sur chaque électrode métallique.
 - c. Placez les électrodes. Reportez-vous aux illustrations sur la gauche pour connaître les sites de mise en place des électrodes.

AHA	CEI	Mise en place des électrodes
V1	C1	Quatrième espace intercostal sur le bord sternal droit
V2	C2	Quatrième espace intercostal sur le bord sternal gauche
V3	C3	À mi-chemin entre les positions des électrodes V2 (C2) et V4 (C4)
V4	C4	Cinquième espace intercostal au niveau de la ligne mi-claviculaire
V5	C5	Ligne axillaire antérieure gauche, au même niveau horizontal que l'électrode V4 (C4)
V6	C6	Ligne mi-axillaire gauche, au même niveau horizontal que l'électrode V4 (C4).
RA	R	Au-dessus du poignet droit
LA	L	Au-dessus du poignet gauche
RL	N	Au-dessus de la cheville droite
LL	F	Au-dessus de la cheville gauche

Précautions

- ☐ Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé avec des unités électrochirurgicales à haute fréquence.
- ☐ Pour les patients porteurs d'un stimulateur, l'équipement pourra confondre une impulsion de stimulation avec un complexe QRS si plusieurs conditions contraires sont présentes simultanément. Surveillez toujours étroitement ces patients.
- ☐ Les électrodes réutilisables doivent être nettoyées après chaque utilisation.
- ☐ Lors de la mise en place des électrodes thoraciques, assurez-vous que les électrodes métalliques ne sont pas en contact les unes avec les autres et que les sites enduits de gel conducteur ne sont pas en contact avec un autre site.

Opérations de base

Connexion du câble patient

Branchez le câble patient au connecteur de câble patient situé sur le côté droit de l'appareil. Serrez les vis pour bien fixer le câble patient à l'appareil.

Mise en marche de l'appareil


Appuyez sur la touche  pour mettre en marche l'appareil.

Saisie des informations patient

Appuyez sur les touches **[ID]**, **[Age]** et **[Gender]** pour saisir les informations relatives au patient.

Acquisition d'un ECG

- ◆ Appuyez sur la touche **[ECG]** pour commencer la mesure automatique et l'enregistrement.
- ◆ Appuyez sur la touche **[Manual]** pour commencer la mesure manuelle et l'enregistrement.
- ◆ Appuyez sur la touche **[Rhythm]** pour commencer la mesure de rythme et l'enregistrement.

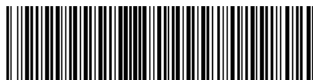

046-004751-00(1.0)

© 2013 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.
Le contenu de ce guide est sujet à modifications sans préavis.

Réglages système

Appuyez sur la touche **[Menu]** pour accéder au menu principal. Configurez les réglages comme vous le souhaitez.

Gestion des archives patient

- En mode normal, appuyez sur F4 pour accéder à l'écran Répertoire afin de supprimer et d'exporter des archives patient.
- Sélectionnez **[Menu]** → **[Gestion des fichiers]** → **[Recher. par date]** ou **[Recher. par ID]** pour rechercher des archives patient.



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Allemagne

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen 518057 République Populaire de
Chine

Tél. : +86 755 81888998
Fax : +86 755 26582680
www.mindray.com

