

ZOLL AED 3[®] Trainer

DAE per la Formazione e Accessori



Simulazione completa di ZOLL AED 3 dotato di Real CPR Help, un feedback in tempo reale sulla RCP

Il dispositivo ZOLL AED 3[®] Trainer è l'unico DAE trainer che offre Real CPR Help[®], un feedback in tempo reale sulla qualità delle compressioni effettuate dal discente. Il trainer consente agli studenti di apprendere la corretta frequenza e profondità delle compressioni toraciche durante la RCP durante la formazione.

Il dispositivo ZOLL AED 3 Trainer è progettato per simulare in toto il funzionamento del DAE clinico, offrendo così agli studenti un'esperienza di soccorso più realistica. Il dispositivo ZOLL AED 3 Trainer include:

- Un display LCD con immagini a colori del soccorso che rispecchiano ciò che vede uno studente sul dispositivo ZOLL AED 3 clinico
- Sensori di contatto sulle piastre di formazione che rilevano il contatto delle piastre con il manichino, eliminando la necessità di un controllo a distanza per le simulazioni di soccorso
- Un pulsante di pausa sul dispositivo che consente all'istruttore di mettere in pausa uno scenario formativo
- Materiali di consumo duraturi che consentono risparmio di tempo e denaro
- Aggiornamento del software/configurazione della lingua semplici mediante USB

Conforme alle linee guida ERC/AHA 2015

Configurazione semplice: tutta la gestione dello scenario formativo e dei settaggi viene eseguita sul trainer.

Le opzioni configurabili includono:

- Scenario formativo
- Modalità operativa (semi-automatica o completamente automatica)
- Messaggi per soccorritori non professionisti
- Messaggi di controllo del respiro
- Volume dei messaggi vocali
- Lingua (varia in base al codice ordinato)

Il dispositivo ZOLL AED 3 Trainer include tutto ciò di cui ha bisogno l'istruttore:

- Dispositivo Trainer ZOLL AED 3
- Cavo elettrodi training CPR Uni-padz[®] per dispositivo ZOLL AED 3 Trainer (almeno 100 sessioni formative)
- Gel/rivestimento per elettrodi da training CPR Uni-padz per dispositivo ZOLL AED 3 Trainer (almeno 50 sessioni formative)
- Quattro (4) batterie formato torcia
- Guida per l'operatore


ZOLL[®]



Feedback della RCP in tempo reale con ampio indicatore della profondità di compressione a due colori



È possibile configurare il funzionamento del dispositivo e gli scenari di soccorso direttamente sul dispositivo

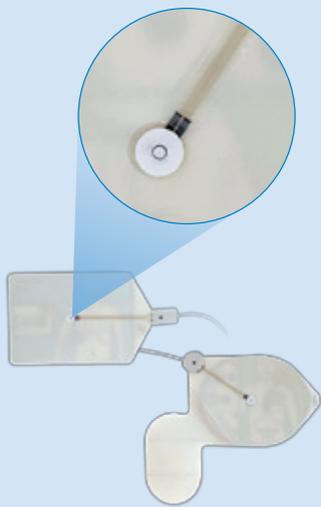

I sensori delle piastre rilevano il contatto con il manichino, eliminando la necessità di un controllo a distanza

Specifiche tecniche del dispositivo ZOLL AED 3 Trainer

Dimensioni: (P x L x A) 12,7 cm x 23,6 cm x 24,7 cm

Peso: 1,8 kg batteria inclusa

Alimentazione: quattro (4) batterie formato torcia (incluse) per DAE da formazione (utilizzabili per oltre 16 ore di formazione)


Scenari di soccorso

Gli istruttori possono impostare diversi scenari di soccorso direttamente sul trainer utilizzando gli appositi pulsanti funzione.




Accessori per il dispositivo ZOLL AED 3 Trainer

Le parti di ricambio devono essere ordinate separatamente.

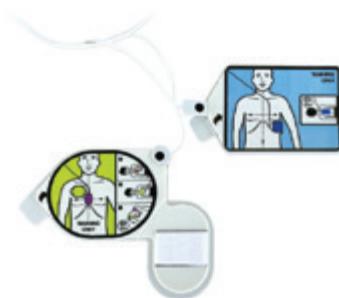

Gel adesivi sostitutivi per elettrodi Trainer CPR Uni-padz®
Codice 8028-000012 (Conf. 5 pz.)

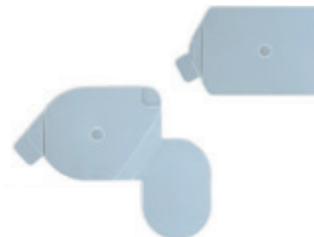

Rivestimenti sostitutivi per elettrodi Trainer CPR Uni-padz
Codice 8028-000013



Manichino dimostrativo Trainer
Codice 8000-0835-01



Kit di aggiornamento software USB Trainer
Codice 8028-000011-XX



Cavo elettrodi training CPR Uni-padz
Codice 8028-000010

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
800-804-4356

Per gli indirizzi e i numeri di fax dei consociati e delle sedi globali, visitare www.zoll.com/contacts.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

©2019 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Real CPR Help, Uni-padz, ZOLL e ZOLL AED 3 sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari. Il defibrillatore ZOLL AED 3 non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti.

Stampato negli Stati Uniti MCN PP 1902 0365-11

ZOLL®