

AED Plus® Trainer2

Accessori per l'addestramento



Controllo completo della simulazione da parte dell'istruttore

L'AED Plus Trainer2 di ZOLL® consente agli istruttori BLS-D di mostrare agli operatori come salvare una vita con AED Plus. È possibile scegliere tra quattro scenari di soccorso pre-impostati oppure gestire manualmente l'intera operazione. Un telecomando wireless permette di controllare diversi Trainer2 AED Plus.

Con questo semplice telecomando, gli istruttori possono scegliere uno scenario e inviarlo al Trainer2 AED Plus in pochi secondi. Basta premere il tasto on-off del Trainer2 per iniziare. L'istruttore decide l'esito dell'analisi, cioè se è richiesto uno shock oppure no, se inviare messaggi relativi all'applicazione degli elettrodi e se l'unità Trainer2 deve consigliare "MAGGIORE COMPRESSIONE" o confermare "COMPRESSIONI ADEGUATE". Un tasto pausa consente all'istruttore di arrestare facilmente la simulazione per parlare con l'operatore per poi riprendere esattamente dal punto in cui si era interrotto.

Linee guida 2010 AHA e ERC Ready

Il software Trainer2 passa facilmente dalle linee guida 2010 dell'AHA a quelle dell'ERC e viceversa.

Il software AED Plus Trainer2 comprende tutto ciò di cui ha bisogno un istruttore

- AED Plus Trainer2 per addestramento
- Telecomando wireless
- Un elettrodo CPR-D-padz® Training
- Una serie di adesivi riutilizzabili per CPR-D-padz Training
- Quattro batterie D
- Due batterie AA
- Guida per l'operatore

AED Plus Trainer2 Accessori



Telecomando AED Plus Trainer2 di ricambio
Codice n. 8008-0007



Custodia AED Plus Trainer
Codice n. 8000-0375-01



Manichino per dimostrazione AED Plus Trainer
Codice n. 8000-0835-01

**ADVANCING
RESUSCITATION.
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation
Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655 800-348-9011

Per gli indirizzi e i numeri di fax delle filiali
e di altre sedi nel mondo, consultare il sito
www.zoll.com/contacts.

Specifiche AED Plus Trainer2

Dimensioni: 13,3 cm A x 24,1 cm L x 29,2 cm P


Peso: 2,2 kg

Alimentazione: 4 batterie D (incluse) per
AED Training (sufficienti per
più di 100 ore di addestramento);
2 batterie AA (incluse) per il
telecomando; l'adattatore per
rete fissa non è disponibile –
utilizzo solo a batterie.



Scenari di soccorso

Con questo semplice telecomando, gli istruttori
possono impostare 5 diversi scenari

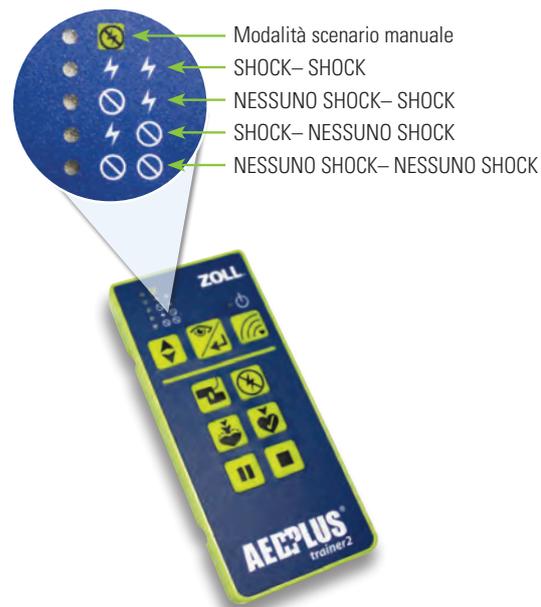

Accessori AED Plus Trainer2

(I ricambi devono essere ordinati separatamente)



Gel adesivi di ricambio per elettrodi
CPR-D-padz Trainer
Codice n. 8900-0803-01



Elettrodi CPR-D-padz Trainer
Codice n. 8900-0804-01



Elettrodi Stat-padz® II Trainer
Codice n. 8900-0805-01
(Confezione da 6pz)



Elettrodi Pedi-padz® II Trainer
Codice n. 8900-000861-01
(Confezione da 6pz)

CE

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

©2011 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Advancing Resuscitation Today, AED Plus, CPR-D-padz, Pedi-padz, Stat-padz, e ZOLL sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Stampato negli Stati Uniti 061110 9656-0202-11

ZOLL®